

Die Kunst, das zu sehen,
was andere nicht sehen
können.



Handgefertigte Lupenbrillen,
Leuchten und Kameras

admetec
We've got your back



We've got your back.

Admetec bietet handgefertigte, individualisierte Lupenbrillen, Leuchten und Kameras.

Wir sind darauf spezialisiert, Lösungen zu entwickeln, die außergewöhnlich leicht, benutzerfreundlich und ergonomisch sind – Sie können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, während wir uns um Ihren Komfort kümmern.

Unsere handgefertigten Lupenbrillen, Leuchten und Kameras sind individuell auf SIE zugeschnitten. Dabei berücksichtigen wir Ihre einzigartige Gesichtsstruktur, Ihren Arbeitsabstand, Ihren Stil und Ihre persönlichen Vorlieben. Benutzerorientiertes Produktdesign in Kombination mit hochwertigen Materialien und Komponenten sind die Grundlage für die hervorragende Qualität von Admetec.

Galilei-Lupenbrillen

Galilei-Lupenbrillen sind extrem kompakt und leicht und bieten gleichzeitig ein großes Sichtfeld und eine hervorragende Schärfentiefe. Hervorragend geeignet für Anwender, die einen guten Überblick, aber keine hohe Vergrößerung benötigen. Unsere Galilei-Lupenbrillen sind in 3 Vergrößerungsstufen erhältlich.

Speziell auf Ihren Arbeitsabstand abgestimmt, auf den Zentimeter genau.



2.5x

Arbeitsabstand
30-60 cm

Gewicht
45g



2.7x

Arbeitsabstand
30-60 cm

Gewicht
37g



3.2x

Arbeitsabstand
30-60 cm

Gewicht
37g

Prismatische Lupen

Prismatische Lupen bieten kristallklare, farbtreue Vergrößerung mit einem weiten Sichtfeld. Jetzt erhältlich mit 4 Vergrößerungsstufen und einem verbesserten ergonomischen Design für erhöhten Komfort und bessere Leistung.

Speziell auf Ihren Arbeitsabstand abgestimmt, auf den Zentimeter genau.



3.8x

Arbeitsabstand
30-70 cm

Gewicht
50g



4.8x

Arbeitsabstand
30-70 cm

Gewicht
51g



5.8x

Arbeitsabstand
30-70 cm

Gewicht
50g



7.2x

Arbeitsabstand
30-70 cm

Gewicht
52g

Ergonomische Lupenbrillen

Admetec Ergo ist in 6 Vergrößerungen erhältlich.

Speziell auf Ihren Arbeitsabstand abgestimmt, auf den Zentimeter genau.



3.0x

Arbeitsabstand
35-70 cm

Gewicht
46g



4.0x

Arbeitsabstand
35-70 cm

Gewicht
46g



5.0x

Arbeitsabstand
35-70 cm

Gewicht
48g



6.0x

Arbeitsabstand
35-70 cm

Gewicht
48g



7.5x

Arbeitsabstand
40-70 cm

Gewicht
49g

ie höchste ergonomische Vergrößerungsleistung, die es gibt, für die Genauigkeit, die Sie brauchen.

10x Vergrößerungsleistung

Working distance range
40-70 cm

Weight
52gr

Von Admetec entwickelte
Ergo-Prismentechnologie

Leichte Linsen aus Polycarbonat
für Langlebigkeit und ein
erstklassiges Bild



Okularlinsen vom japanischen
Weltmarktführer in der Herstellung
von Glaslinsen, FUJITOK®

Wichtigste Vorteile

3 Vergrößerungen, 1 Gerät, dieselbe Haltung.

Erleben Sie Präzision wie nie zuvor mit verstellbaren Lupenbrillen, die drei Vergrößerungen in einem einzigen Gerät bieten.

Ergo V™



Gewicht
55g

Vergrößerungen
3.8x, 5.3x, 7.0x

Arbeitsabstand
40-70cm

Ergo V™ Pro



Weight:
60g

Vergrößerungen
5.6x, 7.4x, 10x

Arbeitsabstand
40-70cm



Ergonomisches Design

Bessere Körperhaltung und geringere Belastung



Unerreichte Vielseitigkeit

Nahtloser Wechsel der Vergrößerung



Maximaler Komfort

Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten

Technische Daten



Nahtloser Wechsel zwischen drei Vergrößerungsstufen in einem Gerät, für ultimative Präzision, Vielseitigkeit und ergonomischen Komfort.



Das Problem

Die statische, oft verdrehte Haltung verursacht Mikrotraumata an Muskeln, Gelenken und Bändern – tägliche Schäden, die schneller zunehmen, als der Körper sie heilen kann.

Mit der Zeit können diese langsam fortschreitenden Verletzungen zu einer kumulativen Traumata-Erkrankung führen, die chronische Rücken- und Nackenschmerzen verursacht, welche die Karrieren vieler talentierter Mediziner beeinträchtigen oder sogar beenden.

Unsere Lösung

Ergo-Lupenbrillen sind die ersten wirklich ergonomischen, individualisierten Lupenbrillen, die mit dem biomechanischen Design des Körpers arbeiten und nicht dagegen.



Ohne Lupenbrille



Normale Lupenbrille



Ergo Lupenbrillen

Leistungsstarke Beleuchtung. Ultraleichte Konstruktion. Kabellos.

Die Butterfly EVO, die kabellose Stirnleuchten-Serie von Admetec, bietet zwei Modelle, die auf optimale Effizienz ausgelegt sind.

-  **Leicht**
Ergonomisch geformt, um leicht auf Ihren Lupenbrillen aufzuliegen
-  **Kabellos**
Mehr Bewegungsfreiheit für mehr Komfort und Effizienz
-  **Benutzerfreundliche Bedienelemente**
Einfache Bedienung mit Tasten zum Ein- und Ausschalten, und zur Anpassung der Lichtintensität
-  **Anzeige des Ladezustands**
Behalten Sie den Ladezustand Ihrer Batterie stets im Blick



Butterfly™ evo

Butterfly kombiniert effektive Beleuchtung in einer ultraleichten, benutzerfreundlichen, kabellosen Konfiguration.

Lichtstärke	Gewicht	Betriebsdauer	Aufladezeit
35k LUX	23 gr	2 Std.	1.25 Std.
Gelbfilter	Batterien	Farbtemperatur	
Externer Filter	3 Stk.	5,750K	



Butterfly-S™ evo

Butterfly-S bietet eine stärkere Lichtintensität, um die Arbeit mit höheren Vergrößerungen zu ermöglichen.

Lichtstärke	Gewicht	Betriebsdauer	Aufladezeit
55k LUX	28 gr	2 Std.	1.5 Std.
Gelbfilter	Batterien	Farbtemperatur	
Externer Filter	3 Stk.	5,750K	





Kabelgebundene Stirnleuchten



Orchid™

Lichtstärke	Gewicht	Betriebsdauer	Aufladezeit
80k LUX	9g	6 Std.	2.5 Std.
Gelbfilter	Batterien	Farbtemperatur	
Externer Filter	2 Stk.	5,750K	



Orchid-F™

Lichtstärke	Gewicht	Betriebsdauer	Aufladezeit
80k LUX	10g	6 Std.	2.5 Std.
Gelbfilter	Batterien	Farbtemperatur	
Eingebaut	2 Stk.	5,750K	



Orchid-E™

Lichtstärke	Gewicht	Betriebsdauer	Aufladezeit
150k LUX	12g	6 Std.	2.5 Std.
Gelbfilter	Batterien	Farbtemperatur	
Eingebaut	2 Stk.	5,750K	



Orchid-S™

Lichtstärke	Gewicht	Betriebsdauer	Aufladezeit
220k LUX	11g	4 Std.	2.5 Std.
Gelbfilter	Batterien	Farbtemperatur	
Externer Filter	2 Stk.	5,750K	



Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Leuchte für Ihre Lupenbrille?
Sehen Sie sich unseren Online-Leitfaden an:
www.admetec.com/de/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo®

Kabellose medizinische Kamera für Lupenbrillen.

Flamingo wurde entwickelt, um genau das einfach zu machen. Eine federleichte, an der Lupe montierte Kamera, mit der Sie aufzeichnen, lehren, übertragen und Vertrauen bei Patienten aufbauen können.





Es ist schwierig, in den Mund eines Patienten zu sehen. Noch schwieriger ist es, das Gesehene mit anderen zu teilen.

Warum Sie sich für Flamingo entscheiden sollten

- ✓ **Mühelose Dokumentation** – Nehmen Sie Full-HD-Videos freihändig direkt aus Ihrer Sichtlinie auf.
- ✓ **Leistungsstarkes Lehrmittel** – Streamen Sie live an Studenten oder Kollegen für Echtzeit-Lernen.
- ✓ **Vertrauen der Patienten** – Zeigen Sie den Patienten genau das, was Sie sehen, und stärken Sie die informierte Einwilligung.

Entwickelt für den täglichen Gebrauch

Zahnärzte und Hygieniker – Falldokumentation, Inhalte für soziale Medien, Patientenaufklärung

Chirurgen – Geführte Eingriffe, Übertragung aus dem OP, medizinrechtliche Aufzeichnungen

Ausbilder und KOLs – Live-Demonstrationen, Kurserstellung, Konferenz-Streaming



Flamingo® Funktionen

Funktion	Vorteil
Ultraleicht (19 g)	Nur 19 g! - Ganztägiger Tragekomfort – leichter als die meisten Lupenbrillen
Integrierte 60-k-Lux-LED	Leistungsstarke, schattenfreie Ausleuchtung
Full-HD-Kamera mit 1080p und 30 fps	Gestochen scharfe, stabile Aufnahmen für die klinische Dokumentation.
Fernbedienung	Volle Kontrolle über die Kamera während des Betriebs, einschließlich der Möglichkeit, während der Aufnahme Standbilder zu machen und das Bild zum Lernen anzuhalten
Ein einziges Hybridkabel	Wirklich kabellos
Lokale Echtzeit-WLAN-Übertragung	Sofortige Freigabe auf jedem PC oder Mac – kein Internet erforderlich
KI-Bearbeitung	KI-Bereinigung entfernt alle unnötigen Teile aus dem Film mit einem einzigen Klick
Austauschbare Objektive (25 mm / 21 mm)	Wählen Sie ein schmales (25 mm) oder breites (21 mm) Sichtfeld
Cloud-Speicher	Sie sind nicht auf den lokalen Speicher angewiesen – alle Videos werden sicher in Ihrem Konto gesichert, unter der Kontrolle des Benutzers Bis zu 4 Stunden Kamera
+ Licht oder 8 Stunden nur Licht Zwei austauschbare Akkus ermöglichen Aufnahmen den ganzen Tag lang	Zwei im laufenden Betrieb austauschbare Akkus ermöglichen ganztägiges Filmen
Sprachaufnahme	Erfassen Sie synchronisierten Ton direkt mit Flamingo
Super Connector	360°-Drehung und vertikaler Videomodus (9:16-Format)
Flamingo-Software	Schnappschüsse, grundlegende Bearbeitung und kostenlose Updates inklusive
Kompatibel mit den meisten Lupenbrillen-Marken	Adapter für die meisten Lupenbrillen-Marken verfügbar
Datensicherheit	Vollständig konform mit den HIPAA- und DSGVO-Anforderungen für den Schutz der Privatsphäre und der Daten von Patienten








Flamingo® Kameraobjektive

Die 21-mm- und 25-mm-Objektive für die drahtlose Flamingo-Kamera mit Leuchte wurden entwickelt, um durch maßgeschneiderte Bildwinkel die Präzision zu optimieren.

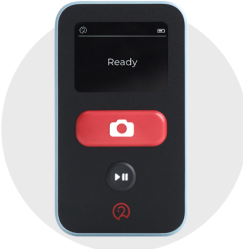

Flamingo® Fernbedienung

Steuern Sie mit der Flamingo® Fernbedienung ganz einfach die Aufnahme- und Kamerafunktionen und sorgen Sie so für einen reibungsloseren klinischen Arbeitsablauf.



Einfacher Austausch der Batterien

Sorgen Sie für eine unterbrechungsfreie Beleuchtung während der Eingriffe. Admetec® Akkus für alle Orchid- und Butterfly-Modelle sind jetzt separat erhältlich.



Extender für Butterfly™ evo

Entwickelt, um den Akku von den Lupenbrillen weg zu verlagern und so für eine bessere Balance, geringeres Gewicht und erhöhten Tragekomfort über den ganzen Tag zu sorgen.



Reinigungstücher für Ihre Lupenbrillen

Halten Sie Ihre Lupenbrillen kristallklar mit Reinigungstüchern, die die Linsenbeschichtungen schützen und für optimale optische Leistung sorgen.



Schützen Sie Ihre Lupenbrillen

Verbessern Sie den Schutz mit leichten Seitenschutzblenden, die für einen sicheren Sitz, zusätzliche Sicherheit und uneingeschränkte Sicht entwickelt wurden.



Laserschutz-Einsatz für Lupenbrillen

Schützen Sie Ihre Augen mit leichten, aufsteckbaren Laser Filtern, die für eine sichere Integration in die Lupenbrille und zuverlässigen, laserspezifischen Schutz entwickelt wurden.

Welcher Stil lässt Ihr Herz höher schlagen?

Sie sind immer noch SIE, auch wenn Sie bei der Arbeit sind. Deshalb haben wir darauf geachtet, eine große Auswahl an Fassungen anzubieten, mit denen Sie Ihre einzigartige Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und bequem arbeiten können.



Blues

-  Marineblau
-  Bronze & Hellblau
-  Schwarz
-  Pink
-  Lila & Grau
-  Roségold



Indie

-  Champagner
-  Orange Lava
-  Mitternachtsblau
-  Schwarz
-  Türkis
-  Grün



Soul

-  Pink
-  Braun & Hellblau
-  Burgunder & Gold
-  Schwarz
-  Türkis
-  White Snow



Jazz

-  Rot & Schwarz
-  Orange & Schwarz
-  Blau & Schwarz
-  Grün & Schwarz
-  Türkis & Roségold



Swing

-  Schwarz
-  Blau
-  Graphit
-  Rot
-  Roségold
-  Weiß



Sie sind sich nicht sicher, welche Fassung und Farbe am besten zu Ihnen passt? Probieren Sie sie mit unserer virtuellen Anprobe-App aus!

www.admetec.com/de/frames





Praktisch. Kompakt. Stoßsicher.

Ihr Admetec®-Erlebnis endet nicht mit dem Arbeitstag. Deshalb haben wir praktische, kompakte und stoßfeste Koffer entwickelt, damit Sie Ihre Lupenbrille und Beleuchtung sicher aufbewahren, schützen und zwischen Kliniken transportieren können.

Butterfly™TM evo (Alle Modelle)

3 Akkus | Ladepad und Kabel | Lupenbrillen | Benutzerhandbuch



Orchid (Alle Modelle)

2 PowerPacks | Ladegerät | Lupenbrillen | Bedienungsanleitung

Lupenbrillen

Umhängeband | Mikrofasertuch | Benutzerhandbuch



Flamingo® Kamera

Steuereinheit | Ladegerät | Fernbedienung | Zubehör

Finden Sie Admetec
überall.



Finden Sie Ihren Händler unter
admetec.com/de/distributors

Die Leidenschaft im Detail sehen





MM40000004 rev.C

We've got **your back.**